



CERRAHİ ÖNLÜK KATALOĐU

Deneyimli Cerrahlar Ve Profesyoneller Tarafından Geliştirildi,
Test Edildi Ve Güvenildi

OPIV Group



opria

KAPSAMLI SEÇİM

Ameliyathanede cerrahların tercihlerini karşılamak için 9 farklı önlük seçeneği sunuyoruz. Her biri farklı stil ve güçlendirmeye sahip önlüklere sahiptir.

GÜVENİLİR KORUMA

Opia'nın önlükleri EN 13795-1 standardında üretilir ve yüksek düzeyde koruma sağlarlar. Üretilen ürünlerimiz lateks içermez ve maksimum performans gerekliliklerini karşılarlar.

* EN 13795 standardı, cerrahi ve diğer tıbbi işlemler sırasında klinik çalışanları ve hastalar arasında enfektif ajanların bulaşmasını önlemek için, tıbbi cihaz olarak kullanılan tek kullanımlık ve tekrar kullanılabilir cerrahi önlükler ve örtülerin özellikleri hakkında bilgi vermektedir.



ISO 9001
ISO 13485



MDR CE 2696
M.2022.MDR.1002



CE 2641



ISO 13795-1
ISO 22612
ATCC 9372



10993-1 10993-11
10993-3 10993-12
10993-5 10993-15
10993-7 10993-17
10993-10



LEVEL I-II-III-IV

OPIV

YÜKSEK KONFOR İLE YÜKSEK PERFORMANS

Tüm cerrahi önlüklerimiz ameliyathanede uzun prosedürler sırasında kullanım için rahattır.

Cerrahları kontaminasyondan korumak için mükemmel su geçirmezlik özelliğine sahiptirler. Tüyleri azaltarak çapraz kontaminasyonu önlerler.Neme ve bakteri penetrasyonuna karşı dayanıklıdır.

Ultrasonik dikişler sayesinde güçlü koruma sağlarlar.

KULLANIMI KOLAY


Tüm Opia cerrahi önlükleri, ameliyathanede daha kolay seçim için aşağıdaki renk kodlamalarına sahiptirler.

Renkler; Mor,beyaz ve mavidir.

*Mor ürün etiketleri ve yakaları çok yüksek performans içindir.

*Beyaz ürün etiketleri ve yakaları standart performans içindir.

*Mavi ürün etiketleri ve yakaları yüksek performans içindir.

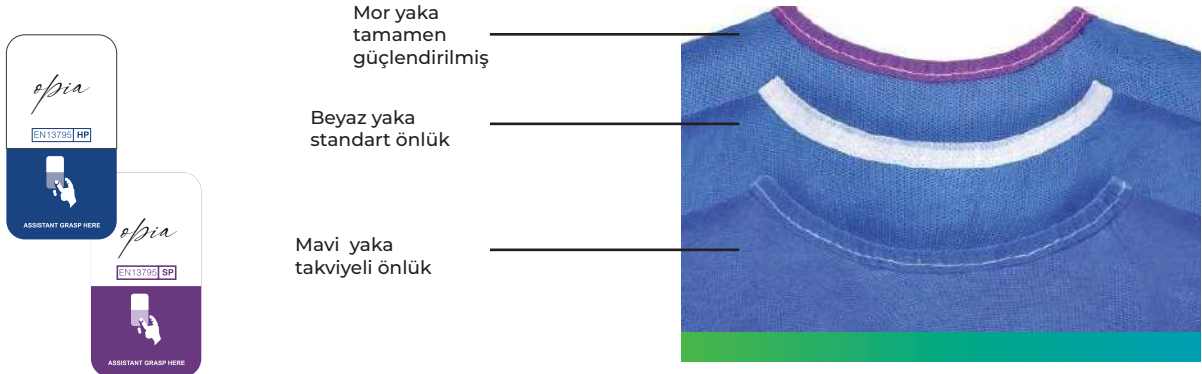



■ ÖNCELİK GÜVENLİK


Opia standart seri SMS cerrahi önlük paketini sunar.Tercih edilen önlük seçimi paketi sterilidir.

Dolayısıyla kontaminasyon riskini azaltır.



İZOLASYON ÖNLÜK

OPIA izolasyon önlükleri, bulaşıcı hastalıkların ve patojenlerin kıyafetlerinize bulaşmasını ve başkalarına yayılmasını önlemek için tasarlanmıştır. İki tip izolasyon önlüğü vardır; sıvıya dayanıklı izolasyon önlükleri ve geçirimsiz izolasyon önlükleri. Sıvıya dayanıklı önlükler, kan ve idrar gibi hafif sıvıları iter, ancak bunlar bir süre sonra önlüğe emilebileceğinden yalnızca kısa bir süre içindir. Geçirimsiz izolasyon önlükleri daha fazla miktarda sıvıya dayanabilir ve malzemeden sızıp giysiyi kirletmez.Nefes alabilir, su geçirmez, hafif ve giymesi kolaydır.İsteğe bağlı olarak örme veya lastik manşetler kullanılmaktadır.Ürünlerimiz hasta yakınları, hastalar,hemşireler, doktorlar ve laboratuvar çalışanları tarafından kullanılabilir.Beli çift bağlamalı ve boyundan bağlamalı veya cırt cırtlı olara üretilmektedir.

S.No	Ürün resmi	Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Beden	Gsm	Renk
01		OP-00101-01S	İzolasyon önlüğü SS .kumaştan imal edilmiştir	S	20/25 30/40	Mavi, Sarı, Beyaz
02		OP-00101-02M	İzolasyon önlüğü SS .kumaştan imal edilmiştir	M	20/25 30/40	Mavi, Sarı, Beyaz
03		OP-00101-03L	İzolasyon önlüğü SS .kumaştan imal edilmiştir	L	20/25 30/40	Mavi, Sarı, Beyaz
04		OP-00101-04XL	İzolasyon önlüğü SS .kumaştan imal edilmiştir	XL	20/25 30/40	Mavi, Sarı, Beyaz
05		OP-00101-05 2XL	İzolasyon önlüğü SS .kumaştan imal edilmiştir	2XL	20/25 30/40	Mavi, Sarı, Beyaz
06		OP-00101-06 3XL	İzolasyon önlüğü SS .kumaştan imal edilmiştir	3XL	20/25 30/40	Mavi, Sarı, Beyaz



ISO 9001
ISO 13485



MDR CE 2696
M.2022.MDR.1002



ISO 13795-1
ISO 22612
ATCC 9372



10993-1 10993-11
10993-3 10993-12
10993-5 10993-15
10993-7 10993-17
10993-10



LEVEL I-II-III-IV




Beden	S	M	L	XL	2XL	3XL	Tolerans
A	110	115	120	125	132	136	+/- 2
B	16	19	20	20,5	21,5	22	+/- 2
C	28	29	29,5	30	31	32	+/- 2
D	54	58	60	62	64	65	+/- 2
E	140	145	150	155	155	155	+/- 2
F	7	7	10	12	12	12	+/- 2



■ STANDART CERRAHİ ÖNLÜK

OPIA standart cerrahi önlük ameliyat operasyonları sırasında kullanılabilir. Bu ürün tek kullanımlık olup, sağlık ekibi ile hasta arasındaki bakteri transferini engeller, hasta ile sağlık ekibi arasında olası kontaminasyon ve enfeksiyon oluşumunu azaltır. Dokunmamış Malzeme (SMMS) cerrahi olarak katlanmıştır.Cerrahları kontaminasyondan korumak için mükemmel su geçirmezlik.Tüpleri azaltarak çapraz kontaminasyonun önlenmesi.Bariyer özelliği ile neme ve bakteri penetrasyonuna karşı dayanıklıdır. Örme manşetler kullanılmaktadır.Beli dört bağlamalı ve boyundan bağlamalı veya cırt cırtlı olarak üretilmektedir.



S.No	Ürün resmi	Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Beden	Gsm	Renk
01		OP-0201-01S	SMMS dokunmamış kumaştan yapılmıştır - spunbond - meltblown - spunbond	S	35/40 45/50	Yeşil, tıbbi mavi
02		OP-00201-02M	SMMS dokunmamış kumaştan yapılmıştır - spunbond - meltblown - spunbond	M	35/40 45/50	Yeşil, tıbbi mavi
03		OP-00201-03L	SMMS dokunmamış kumaştan yapılmıştır - spunbond - meltblown - spunbond	L	35/40 45/50	Yeşil, tıbbi mavi
04		OP-00201-04XL	SMMS dokunmamış kumaştan yapılmıştır - spunbond - meltblown - spunbond	XL	35/40 45/50	Yeşil, tıbbi mavi
05		OP-00201-05 2XL	SMMS dokunmamış kumaştan yapılmıştır - spunbond - meltblown - spunbond	2XL	35/40 45/50	Yeşil, tıbbi mavi
06		OP-00201-06 3XL	SMMS dokunmamış kumaştan yapılmıştır - spunbond - meltblown - spunbond	3XL	35/40 45/50	Yeşil, tıbbi mavi



ISO 9001
ISO 13485



MDR CE 2696
M.2022.MDR.1002



FDA



ISO 13795-1
ISO 22612
ATCC 9372



10993-1 10993-11
10993-3 10993-12
10993-5 10993-15
10993-7 10993-17
10993-10




LEVEL HI-III-IV



Beden	S	M	L	XL	2XL	3XL	Tolerans
A	110	115	120	125	132	138	+/- 2
B	18	19	20	20,5	21,5	22	+/- 2
C	28	29	29,5	30	31	32	+/- 2
D	54	58	60	62	64	65	+/- 2
E	140	145	150	155	155	155	+/- 2
F	7	7	10	12	12	12	+/- 2

TAKVİYELİ CERRAHİ ÖNLÜK

S.No	Ürün resmi	Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Beden	Gsm	Renk
01		OP-00202-01S	SMS +PE nonwoven - spunbond - meltblown spunbond polietilenden üretilmiştir	S	46/51	Mavi
02		OP-00202-02M	SMS +PE nonwoven - spunbond - meltblown spunbond polietilenden üretilmiştir	M	46/51	Mavi
03		OP-00202-03L	SMS +PE nonwoven - spunbond - meltblown spunbond polietilenden üretilmiştir	L	46/51	Mavi
04		OP-00202-04XL	SMS +PE nonwoven - spunbond - meltblown spunbond polietilenden üretilmiştir	XL	46/51	Mavi
05		OP-00202-05 2XL	SMS +PE nonwoven - spunbond - meltblown spunbond polietilenden üretilmiştir	2XL	46/51	Mavi
06		OP-00202-06 3XL	SMS +PE nonwoven - spunbond - meltblown spunbond polietilenden üretilmiştir	3XL	46/51	Mavi



ISO 9001
ISO 13485



MDR CE 2696
M.2022.MDR.1002



ISO 13795-1
ISO 22612
ATCC 9372



10993-1 10993-11
10993-3 10993-12
10993-5 10993-15
10993-7 10993-17
10993-10



LEVEL I-II-III-IV



Beden	S	M	L	XL	2XL	3XL	Tolerans
A	110	115	120	125	132	136	+/- 2
B	18	19	20	20,5	21,5	22	+/- 2
C	28	29	29,5	30	31	32	+/- 2
D	54	58	60	62	64	65	+/- 2
E	140	145	150	155	155	155	+/- 2
F	7	7	10	12	12	12	+/- 2


OPIA takviyeli cerrahi önlük ameliyat operasyonları sırasında kullanılabilir. Bu ürün tek kullanımlık olup, sağlık ekibi ile hasta arasındaki bakteri transferini engeller.Hasta ile sağlık ekibi arasında olası kontaminasyon ve enfeksiyon oluşumunu azaltır.Kollarda ve göğüste ekstra güçlendirilmiş katman mevcuttur.Dokunmamış Malzeme (SMS+PE). Ultrasonik dikişlere sahiptir.Cerrahi olarak katlanmışdır. Cerrahları kontaminasyondan korumak için mükemmel su geçirmezlik.Tüyleri azaltarak çapraz kontaminasyonun önlenmesi.Bariyer özelliği ile neme ve bakteri penetrasyonuna karşı dayanıklıdır.Örme manşetler kullanılmaktadır.Beli dört bağlamalı ve boyundan bağlamalı veya cırt cırtlı olarak üretilmektedir.





TAM TAKVİYELİ CERRAHİ ÖNLÜK

OPIA tam takviyeli önlük cerrahi operasyonlar sırasında kullanılabilir. Tek kullanımlıktır ve sağlık ekibi ile hasta arasında bakteri geçişini engeller. SMMS + PE Film, Ultrasonik Kaynaklı ve cerrahi olarak katlanmıştır. Cerrahları kontaminasyondan korumak için mükemmel su geçirmezlik özelliğine sahiptir. Tüyleri azaltarak çapraz kontaminasyonu önler. Bariyer özelliği ile sıvılara karşı dayanıklıdır. Neme ve bakteri penetrasyonuna karşı dayanıklıdır. Toksik maddeler içermez. Örme manşetler kullanılmaktadır. Beli dört bağlamalı ve boyundan bağlamalı veya cırt cırtlı olarak üretilmektedir.

S.No	Ürün resmi	Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Beden	Gsm	Renk
01		OP-00203-01S	SMMS+PE dokunmamış kumaş-spunbond-meltblown-meltblown-spunbond-polietilenden yapılmıştır	S	55/60	Mavi-yeşil tıbbi mavi
02		OP-00203-02M	SMMS+PE dokunmamış kumaş-spunbond-meltblown-meltblown-spunbond-polietilenden yapılmıştır	M	55/60	Mavi-yeşil tıbbi mavi
03		OP-00203-03L	SMMS+PE dokunmamış kumaş-spunbond-meltblown-meltblown-spunbond-polietilenden yapılmıştır	L	55/60	Mavi-yeşil tıbbi mavi
04		OP-00203-04XL	SMMS+PE dokunmamış kumaş-spunbond-meltblown-meltblown-spunbond-polietilenden yapılmıştır	XL	55/60	Mavi-yeşil tıbbi mavi
05		OP-00203-05 2XL	SMMS+PE dokunmamış kumaş-spunbond-meltblown-meltblown-spunbond-polietilenden yapılmıştır	2XL	55/60	Mavi-yeşil tıbbi mavi
06		OP-00203-06 3XL	SMMS+PE dokunmamış kumaş-spunbond-meltblown-meltblown-spunbond-polietilenden yapılmıştır	3XL	55/60	Mavi-yeşil tıbbi mavi



ISO 9001
ISO 13485



MDR CE 2696
M.2022.MDR.1002



ISO 13795-1
ISO 22612
ATCC 9372



10993-1 10993-11
10993-3 10993-12
10993-5 10993-15
10993-7 10993-17
10993-10




LEVEL III-III-IV



Beden	S	M	L	XL	2XL	3XL	Tolerans
A	110	115	120	125	132	138	+/- 2
B	18	19	20	20,5	21,5	22	+/- 2
C	28	29	29,5	30	31	32	+/- 2
D	54	58	60	62	64	65	+/- 2
E	140	145	150	155	155	155	+/- 2
F	7	7	10	12	12	12	+/- 2

BIFLEX CERRAHİ ÖNLÜK

S.No	Ürün resmi	Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Beden	Gsm	Renk
01		OP-00205-01S	(PP+Spunlace (dokunmamış kumaş))	S	40/50	Mavi
02		OP-00205-02M	(PP+Spunlace (dokunmamış kumaş))	M	40/50	Mavi
03		OP-00205-03L	(PP+Spunlace (dokunmamış kumaş))	L	40/50	Mavi
04		OP-00205-04XL	(PP+Spunlace (dokunmamış kumaş))	XL	40/50	Mavi
05		OP-00205-05 2XL	(PP+Spunlace (dokunmamış kumaş))	2XL	40/50	Mavi
06		OP-00205-06 3XL	(PP+Spunlace (dokunmamış kumaş))	3XL	40/50	Mavi



ISO 9001
ISO 13485



MDR CE 2696
M.2022.MDR.1002



CENTROCOT

Innovation experience

ISO 13795-1
ISO 22612
ATCC 9372



10993-1 10993-11
10993-3 10993-12
10993-5 10993-15
10993-7 10993-17
10993-10



LEVEL I-II-III-IV



Beden	S	M	L	XL	2XL	3XL	Tolerans
A	110	115	120	125	132	136	+/- 2
B	18	19	20	20,5	21,5	22	+/- 2
C	28	29	29,5	30	31	32	+/- 2
D	54	58	60	62	64	65	+/- 2
E	140	145	150	155	155	155	+/- 2
F	7	7	10	12	12	12	+/- 2


OPIA biflex cerrahi önlüklerimiz, hidrofobik uygulama ile emiciliği yüksek düzeyde hızlandırılmış spunbond nonwoven tela ile; microemboss gravürlenmiş bariyer filmin sıcak tutkal (hotmelt) ile lamine edilmesi ile üretilmektedir. 2 katmanlı olarak üretilmektedir. Biflex cerrahi önlüklerimizde kullanılan kumaşlarımız yüksek emiciliği sayesinde, sıvıyı çok hızlı emerek, bariyer katmanda tutarak koruma sağlamaktadır. Neme ve bakteri penetrasyonuna karşı dayanıklıdır. Toksik maddeler içermez. Örme manşetler kullanılmaktadır. Beli dört bağlamalı ve boyundan bağlamalı veya cırt cırtlı olarak üretilmektedir. EN 13795 standartlarına göre üretilen biflex cerrahi önlük kumaşlarımız; ameliyathane ortamında ulaşılması gereken minimum limit değerlerinin en az 2 kat üzerinde üretilmekte olup; EN 13795 test kriterlerinin üzerinde performans sergilemektedir.



ÜROLOJİ ÖNLÜK

OPIA üroloji önlüklerimiz tek kullanımlıktır. Hibrit Kumaş PP Spunbond+PE Film(Biflex) Ultrasonik kaynaklı, ergonomik, cerrahlar için rahat bir oturma pozisyonu sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bariyer özelliği ile sıvılara karşı dayanıklıdır. Üroloji cerrahi önlüklerimizde kullanılan kumaşlarımız yüksek emiciliği sayesinde, sıvıyı çok hızlı emerek, bariyer katmanda tutarak koruma sağlamaktadır. Neme ve bakteri penetrasyonuna karşı dayanıklıdır. Toksik maddeler içermez. Önlük manşeti örmedir. Cerrahi eldivenlerle uyumludur, eldivenin kaymasını engeller. Beli dört bağlamalı ve boyundan bağlamalı veya cırt cırtlı olarak üretilmektedir.



S.No	Ürün resmi	Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Beden	Gsm	Renk
01		OP-00204-01S	SMMS + hibrit kumaş PP Spunbond + PE film Biflex	S	60	Yeşil, tıbbi mavi
02		OP-00204-02M	SMMS + hibrit kumaş PP Spunbond + PE film Biflex	M	60	Yeşil, tıbbi mavi
03		OP-00204-03L	SMMS + hibrit kumaş PP Spunbond + PE film Biflex	L	60	Yeşil, tıbbi mavi
04		OP-00204-04 XL	SMMS + hibrit kumaş PP Spunbond + PE film Biflex	XL	60	Yeşil, tıbbi mavi
05		OP-00204-05 2XL	SMMS + hibrit kumaş PP Spunbond + PE film Biflex	2XL	60	Yeşil, tıbbi mavi
06		OP-00204-06 3XL	SMMS + hibrit kumaş PP Spunbond + PE film Biflex	3XL	60	Yeşil, tıbbi mavi



ISO 9001
ISO 13485



MDR CE 2696
M.2022.MDR.1002



ISO 13795-1
ISO 22612
ATCC 9372



10993-1 10993-11
10993-3 10993-12
10993-5 10993-15
10993-7 10993-17
10993-10




LEVEL I-II-III-IV



Beden	S	M	L	XL	2XL	3XL	Tolerans
A	110	115	120	125	132	136	+/- 2
B	18	19	20	20,5	21,5	22	+/- 2
C	28	29	29,5	30	31	32	+/- 2
D	54	56	60	62	64	65	+/- 2
E	140	145	150	155	155	155	+/- 2
F	7	7	10	12	12	12	+/- 2

KEMOTERAPİ ÖNLÜK

OPIA kemoterapi önlüklerimiz, müşterilerimize sunduğumuz geniş seçenek yelpazesi nedeniyle medikal tekstil alanında en gelişmiş olanıdır. Ultrasonik dikiş, yapışkan bant dikişleri, kullanım ortamına bağlı olarak doğru kalınlık için 50 gsm ila 60 gsm arasında değişen kumaş yelpazesine sahiptir. USP 800 yönergelerine uymak için bantlanmış dikişlere sahip poli-kaplı polipropilenden yapılmıştır. Ayarlanabilir ve güvenli tutuş için cırt cırt boyun modeline sahiptir. Konfor ve koruma için örgü manşetlere sahiptir. Manşetler cerrahi eldivenlerle uyumludur, eldivenin kaymasını engeller. Beli dört bağlamalıdır. Malzemeler ve dikişler, 11 kemoterapi ilacına karşı test edilmiştir.

S.No	Ürün resmi	Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Beden	Gsm	Renk
01		OP-00206-01S	SMMS / SMS +PE	S	55/60	Mavi, Sarı, Medikal Mavi
02		OP-00206-02M	SMMS / SMS +PE	M	55/60	Mavi, Sarı, Medikal Mavi
03		OP-00206-03L	SMMS / SMS +PE	L	55/60	Mavi, Sarı, Medikal Mavi
04		OP-00206-04 XL	SMMS / SMS +PE	XL	55/60	Mavi, Sarı, Medikal Mavi
05		OP-00206-05 2XL	SMMS / SMS +PE	2XL	55/60	Mavi, Sarı, Medikal Mavi
06		OP-00206-06 3XL	SMMS / SMS +PE	3XL	55/60	Mavi, Sarı, Medikal Mavi



ISO 9001
ISO 13485



MDR CE 2696
M.2022.MDR.1002



ISO 13795-1
ISO 22612
ATCC 9372



10993-1 10993-11
10993-3 10993-12
10993-5 10993-15
10993-7 10993-17
10993-10



LEVEL I-II-III-IV




Beden	S	M	L	XL	2XL	3XL	Tolerans
A	110	115	120	125	132	138	+/- 2
B	18	19	20	20,5	21,5	22	+/- 2
C	28	29	29,5	30	31	32	+/- 2
D	54	58	60	62	64	65	+/- 2
E	140	145	150	155	155	155	+/- 2
F	7	7	10	12	12	12	+/- 2



■ TEK KULLANIMLIK ALT ÜST TAKIM

Opia'da üretilen cerrahların kullanmış oldukları alt üst takımları son sistem ve steril ortamlarda üretilmektedir. Bu ürünümüz sağlık hizmetlerinde kkd'nin önemli bir parçası olup, cerrahların ve ameliyathane personellerinin mikroorganizmaların ve vücut sıvılarının hastaları ve hastalardan da personellere bulaşmasını önlemek üzere ikili bir işlev yerine getirmek üzere kullanılmaktadır. Genellikle cerrahi operasyonlar öncesinde kullanılmaktadır. Bu da cerrahların ve cerrahi hemşirelerin operasyon öncesinde ve operasyon esnasında daha rahat hareket etmelerini sağlamaktadır. tarbeiter beiträgt.



S.No	Ürün resmi	Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Beden	Gsm	Renk
01		OPJ-00101-S	SMS	S	35	Mavi
02		OPJ-00101-M	SMS	M	35	Mavi
03		OPJ-00101-L	SMS	L	35	Mavi
04		OPJ-00101-XL	SMS	XL	35	Mavi
05		OPJ-00101-2XL	SMS	2XL	35	Mavi
06		OPJ-00101-3XL	SMS	3XL	35	Mavi



ISO 9001
ISO 13485



MDR CE 2696
M.2022.MDR.1002



CENTROCOT
Innovation experience

ISO 13795-1
ISO 22612
ATCC 9372



10993-1 10993-11
10993-3 10993-12
10993-5 10993-15
10993-7 10993-17
10993-10



LEVEL I-II-III-IV

Beden	Üst		Alt	
	Uzunluk	Göğüs	Uzunluk	Genişlik
S	73	58.5	107	45
M	74.5	60	108	49
L	76	63	109	53
XL	77.5	66	110	57
2XL	79	72	112	61
3XL	80.5	78	115	74.5




OPIA temel tek kullanımlık uzun kollu ısınma ceketi, hastane personelinizi sıcak tutar, hafif sıvı sıçramalarından korur ve sağlık tesisinin veya ameliyathanenin daha serin açık alanlarında profesyonel görünmesini sağlar. 40-35 gsm SS/SMMS kumaşımız, dinamik soğutma ve nem yönetimi sağlayarak çevre koşullarına uyum sağladığı için sıvıya karşı son derece dayanıklı ve nefes alabilirdir. Daha fazla konfor ve kolların kıvrılmasını önlemek için ceket, örme bir yaka ve manşetler içerir. Ayrıca pratik tarafta üç adet güçlendirilmiş cep entegre edilmiştir. Son olarak, kolay kurulum için ceketin düğmeleri bulunur. Çeşitli renklerde ve S'den 3XL'a kadar geniş bir beden yelpazesi mevcuttur.

* Tek kullanımlık uzun kollu ısınma ceketi, personelinizin korunmasına ve rahat etmesine yardımcı olan daha geniş tek kullanımlık koruyucu giysi portföyünün bir parçasıdır.

■ TEK KULLANIMLIK MEDİKAL CEKET

opia

S.No	Ürün resmi	Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Beden	Gsm	Renk
01		OPJ-00101-UNX-S	SMS	S	35	Mavi, beyaz
02		OPJ-00101-UNX-M	SMS	M	35	Mavi, beyaz
03		OPJ-00101-UNX-L	SMS	L	35	Mavi, beyaz
04		OPJ-00101-UNX-XL	SMS	XL	35	Mavi, beyaz
05		OPJ-00101-UNX-2XL	SMS	2XL	35	Mavi, beyaz
06		OPJ-00101-UNX-3XL	SMS	3XL	35	Mavi, beyaz



ISO 9001
ISO 13485



MDR CE 2696
M.2022.MDR.1002



CE 2841



ISO 13795-1
ISO 22612
ATCC 9372



10993-1 10993-11
10993-3 10993-12
10993-5 10993-15
10993-7 10993-17
10993-10




LEVEL I-II-III-IV

TEK KULLANIMLIK LABORATUVAR CEKET

OPIA SMS antistatik laboratuvar önlüğü, yüzeyi kapatmak ve kimyasal sıvılara karşı koruma sağlamak için dokunmamış sms'den yapılmıştır. Ultrasonik dikişlere sahiptir. Laboratuvar çalışanları kontaminasyondan korumak için mükemmel su geçirmezlik. Tüpleri azaltarak çapraz kontaminasyonun önlenmesi. Neme ve bakteri penetrasyonuna karşı dayanıklıdır. Daha fazla konfor ve kolların kıvrılmasını önlemek için ceket, örme bir yaka ve manşetler içerir. Ayrıca pratik tarafta üç adet güçlendirilmiş cep entegre edilmiştir. Kolay giyim için ceketin çit çitleri bulunur.Çeşitli renklerde ve S'den 3XL'a kadar geniş bir beden yelpazesi mevcuttur.Gıda işleme ünitelerinde, dış kliniklerinde ,laboratuvarlarda ve birçok yerde kullanım için uygun olan bu nefes alabilir laboratuvar önlüğü, kullanıcının kıyafetlerine olası sıvı sıçramasını engeller ve üstün koruma sunar.keitsspritzern, Barrieren und bietet hervorragenden Schutz.



S.No	Ürün resmi	Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Beden	Gsm	Renk
01		OPJ-00101-00 S	SMS	S	55/60	Mavi, Beyaz
02		OPJ-00101-00 M	SMS	M	55/60	Mavi, Beyaz
03		OPJ-00101-00 L	SMS	L	55/60	Mavi, Beyaz
04		OPJ-00101-00 XL	SMS	XL	55/60	Mavi, Beyaz
05		OPJ-00101-00 2XL	SMS	2XL	55/60	Mavi, Beyaz
06		OPJ-00101-00 3XL	SMS	3XL	55/60	Mavi, Beyaz



ISO 9001
ISO 13485



MDR CE 2696
M.2022.MDR.1002



CENTROCOT
innovation experience


ISO 13795-1
ISO 22612
ATCC 9372



10993-1 10993-11
10993-3 10993-12
10993-5 10993-15
10993-7 10993-17
10993-10



LEVEL I-II-III-IV

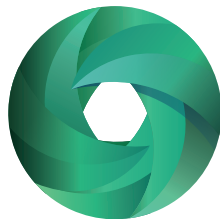

OPIV
Group



opiamedical.eu